



**Foottee** therapy  
foot reflexology



### **Руководство пользователя**

Вся информация актуальна на момент печати





OGAWA

**Foottee** *therapy*  
foot reflexology

## **Руководство пользователя**

Вся информация актуальна на момент печати

# Содержание

Меры безопасности	5
Условия гарантии	8
Составные части и аксессуары	9
Порядок эксплуатации	9
Спецификация	11
Устранение проблем в работе	12
Правила чистки и хранения	13
Контактная информация	14

# Меры безопасности

## 1. Условия использования массажера

- Не используйте массажер в условиях высокой влажности или пыльной среде, так как это может привести к поломке или поражению электрическим током
- Не используйте массажер в ванной комнате
- Не используйте массажер в постели
- Не ставьте и не храните массажер там, где он может упасть в воду
- Избегайте контакта массажера с водой и держите его в безопасном месте
- Не садитесь на массажер
- Не подвергайте массажер нагреву или попаданию прямых солнечных лучей

## 2. Ограничения использования

Если у вас есть проблемы со здоровьем или Вы относитесь к категориям людей указанных ниже, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажера:

- При проблемах с сердцем
- Во время беременности
- При любых проблемах, связанных со здоровьем

## 3. Не используйте массажер

- Более 15 минут одновременно
- Массажер не должен использоваться детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями без присмотра взрослых или опекуна
- Не используйте массажер перед сном
- Если тканевое покрытие массажера разорвано
- Если на массажер случайно пролита вода
- Если во время массажа Вы почувствовали дискомфорт или сильную боль
- При любой неисправности или ненормальной работе массажера.
- Если произошло короткое замыкание

## 4. Важные предупреждения

- Отключите массажер от сети, если он не используется
- Не используйте с массажером аксессуары, не рекомендованные OGAWA.

# Меры Безопасности

- Никогда не пользуйтесь массажером, если у него поврежден шнур или вилка питания. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр OGAWA для осмотра и ремонта.
- Не роняйте массажер и не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия.
- Осторожно используйте функцию подогрева. Бесконтрольное использование функции подогрева детьми и недееспособными лицами может быть опасным.
- Не поднимайте и не переносите массажер держась за шнур питания.
- Данный массажер предназначен только для персонального использования и не должен использоваться для коммерческих целей.
- Не накрывайте массажер во время его работы.
- Не допускайте чрезмерного давления на массажер и избегайте соприкосновения его с острыми предметами, которые могут повредить поверхность.

## 5. Предупреждения

- Внимательно прочитайте данное руководство перед эксплуатацией массажера для обеспечения безопасного и правильного использования.
- Массажер не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии опыта и знаний о его правильном использовании. В этом случае обязательно присутствие взрослых или опекунов.
- Бесперывное использование массажера может привести к его перегреву и сокращению срока службы. Если это произошло, немедленно прекратите использование массажера и дайте ему остыть перед началом работы.
- Лицам, проходящим курс лечения, нужно проконсультироваться с врачом перед применением массажера. Пожалуйста, не используйте массажер, если вы чувствуете себя плохо.
- Если массажер используется в холодном помещении, не допускайте резкого повышения температуры в помещении.

# Меры Безопасности

- Если массажер хранился в холодном месте и был внесен в теплое помещение, необходимо подождать три часа перед началом его использования.
- Не разбирайте массажер. Прикосновение к внутренним компонентам может привести к неисправности или поражению электрическим током.
- Не подключайте и не отключайте кабель питания от электрической розетки мокрыми руками.



## Правильная утилизация этого продукта

Эта маркировка означает, что изделие не должно утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека от неконтролируемой утилизации отходов, сдавайте их на переработку, чтобы способствовать обоснованному повторному использованию материальных ресурсов.



**Внимание: прочитайте эту инструкцию перед использованием.**

# Условия Гарантии

1. Данная гарантия не подлежит передаче.
2. Настоящая гарантия действительна только если массажер был приобретен у официального дистрибьютора или дилера Огава.
3. Предъявление доказательства покупки (оригинал платежной квитанции, накладной или чека) является обязательным для всех гарантийных ремонтов.
4. Все подразумеваемые гарантии ограничены в общей продолжительности 2 лет с момента покупки.
5. Повреждения массажера, возникшие в результате неправильного его использования, неправильной перевозки и хранения, а также внесения изменений в конструкцию и неквалифицированного ремонта не распространяются на эту гарантию.
6. Гарантия не распространяется на аксессуары и приспособления, не входящие в состав массажера.
7. Гарантия не действует на массажеры используемые для аренды, офисной , коммерческой , выставочной эксплуатации или для других целей, кроме домашнего использования.
8. Все услуги, предусмотренные настоящей гарантией должны быть выполнены только с согласования с Огава и осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.




# Составные Части

## Проверьте комплектацию массажера:

1. Просмотрите содержимое коробки с массажером.
2. Проверьте комплектацию массажера. В случае отсутствия каких-либо частей, пожалуйста, свяжитесь с сервисной службой Огава.
  - Тканевые чехлы
  - Ролики
  - Кнопки управления
  - Провод питания и вилка
  - Резиновые ножки

# Порядок Эксплуатации

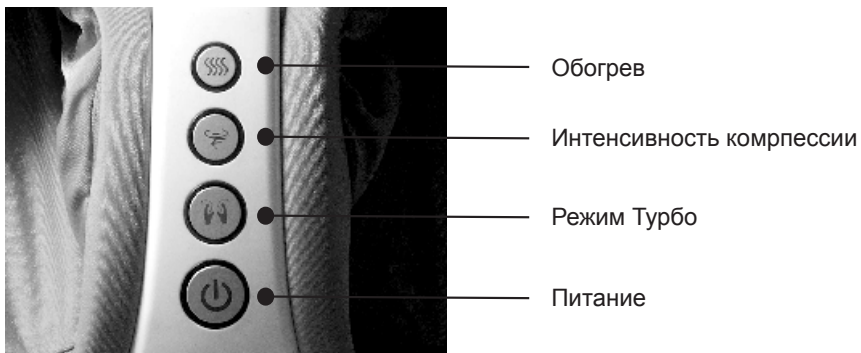

## 1. Подготовка к использованию

### 1) Перед использованием массажера

- Достаньте массажер из упаковки.
- Внимательно прочитайте инструкцию по использованию.
- Подключите вилку питания в розетку и массажер готов к использованию.

# Порядок Эксплуатации

## 2) Использование массажера

- Аккуратно поставьте ноги на массажер, чтобы приступить к массажу.

## 2. Порядок эксплуатации

### 1) Питание:

Пожалуйста, подключите массажер к разъему адаптера питания и вставьте вилку в сетевую розетку соответственно. Когда массажер включен, нажмите кнопку питания один раз, чтобы активировать 15-минутную программу массажа. При этом индикатор кнопки будет светиться красным цветом. Нажмите кнопку второй раз, чтобы выбрать вторую программу массажа. Индикатор кнопки будет мигать в течение 5 секунд, а затем светиться красным. Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить массажер.

### 2) Функция обогрева

Обогрев автоматически включается при запуске массажера в работу. Нажмите эту кнопку один раз, чтобы выключить обогрев. Нажмите ее еще раз, чтобы снова включить обогрев.

### 3) Турбо

По умолчанию, установлен режим разминающего массажа с низкой скоростью. Нажмите кнопку турбо чтобы увеличить скорость и нажмите ее снова, чтобы вернуться к скорости по умолчанию.

### 4) Интенсивность компрессии

По умолчанию, компрессионный массаж имеет низкую интенсивность. Нажмите кнопку интенсивности чтобы увеличить давление и нажмите снова, чтобы вернуться к интенсивности по умолчанию.

## 3. Функциональные особенности массажера

- 1) Разминающий и Шиатцу массаж для стоп.
- 2) Функция обогрева повышает эффективность Шиатцу массажа и увеличивает кровообращение.
- 3) Эргономичная панель управления
- 4) Автоматическое отключение через 15 минут.
- 5) LED индикация режимов работы.

# Порядок Эксплуатации

## 4. Преимущества использования массажера

- 1) Снимает усталость.
- 2) Улучшает кровообращение, активирует рефлекторные зоны на подошвах ног
- 3) Снимает нервное напряжение и уменьшает стресс
- 4) Способствует релаксации
- 5) Укрепляет иммунную систему

## 5. После использования

После использования, нажмите кнопку “Питание”, чтобы остановить массажер и отключите его от розетки.

# Спецификация

Наименование	Foottee Therapy
Модель	OF1708
Напряжение питания	АС220- 240В
Частота	50/60Гц
Мощность	50Вт
Таймер	15 минут
Габариты(Длина/ширина/ высота)	Д417*Ш357*В224(мм)

# Устранение Проблем в Работе

Микропроцессорная плата массажера подвержена сбоям при скачках напряжения в диапазоне 10% - 15%. В этом случае могут возникнуть следующие проблемы в работе:

Проблемы	Решения
Не включается	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Вставьте вилку в розетку</li><li>2. Убедитесь, что шнур питания подключен правильно</li></ol>
Нет обогрева	Функция обогрева будет активирована только после двойного нажатия кнопки
Панель светится но массажер не работает	Возможно массажер сильно нагрелся после длительного использования, что активировало защиту от перегрева. Пожалуйста, отключите питание массажера и дайте ему остыть в течение 30 до 50 минут.
Массажные функции не переключаются	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Выключите и включите питание</li><li>2. Занова подключите шнур питания</li></ol>
Массажер внезапно остановился	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Выключите и включите питание</li><li>2. Занова подключите шнур питания</li></ol>

# Правила Чистки и Хранения

## Хранение

- Поместите массажер в коробку и храните его в безопасном, сухом и прохладном месте. Избегайте контакта с острыми краями или острыми предметами, которые могут повредить или проткнуть поверхность массажера. При хранении сматывайте шнур питания в области днища массажера. Не подвешивайте массажер за сетевой шнур.

## Чистка

- Не погружайте массажер в любую жидкость во время чистки.
- Отключите массажер и дайте ему остыть перед чисткой.
- Очищайте его только мягкой и слегка влажной губкой.
- Никогда не допускайте попадания воды или любой другой жидкости, которая может попасть внутрь массажера.
- Избегайте использования абразивных чистящих средств, щеток, бензина, керосина, жидкости для чистки стекол, полировки мебели или растворителя для краски при чистке.
- Не пытайтесь ремонтировать массажер самостоятельно. Для обслуживания, пожалуйста, свяжитесь с Огава.

## Внимание

- Оберегайте тканевые чехлы от разрыва.
- Используйте массажер осторожно, чтобы не повредить его, а также избежать травм.

# Контактная информация



## **MALAYSIA**

**Healthy World Lifestyle Sdn Bhd**  
No. 22 Jalan Anggerik Mokara 31/47  
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  
Tel : +603-5121 4286  
Fax: +603-5121 4386



## **HONG KONG, CHINA**

**OGAWA Health Care International (HK) Ltd**  
Room 3&5, 7/F International Trade Centre  
11-19 Sha Tsui Road  
Tsuen Wan  
Hong Kong  
Tel :+85 2 2428 8823  
Fax:+85 2 2410 0119



## **SINGAPORE**

**OGAWA Health-Care Pte Ltd**  
17 Kaki Bukit Road 2  
K. B. Warehouse Complex  
Singapore 417846  
Tel : +065-6846 8588  
Fax: +065-6846 7677



## **SHANGHAI, CHINA**

**OGAWA (SHANGHAI)  
Health-Care Equipment Co. Ltd**  
Block B 2903, Dazhong Jinrong Plaza  
1023 West Yan'an Road, Zhangning  
District,  
Shanghai, China P.R.C. 200050  
Hotline : 400 885 9880  
Website: [www.ogawaworld.net.cn](http://www.ogawaworld.net.cn)



## **AUSTRALIA**

**OGAWA International (AUST) Pty Ltd**  
3/26, Day Street North  
Silverwater, 2128 NSW  
Sydney, Australia  
Tel : +612-9666 8883  
Fax: +612-9666 8886



## **VIETNAM**

**OGAWA Vietnam**  
171 Nguyen Thi Thap Street  
Tan Phu Ward  
Dist 7  
Ho Chi Minh City, Vietnam  
Tel : +84 8 3775 3093 / 3775 3094  
Fax: +84 8 3775 3095



## **INDONESIA**

**PT Healthy World**  
Lodan Center Block O No 20  
Jalan Lodan Raya No 2  
Jakarta Utara 14430  
Tel : +62 21-6983 1123  
Fax: +62 21-6983 1124



## **MYANMAR**

**Medi Myanmar Group Ltd**  
No. 46, Pyay Road, 6 1/2 mile  
Hlaing Township, Yangon 11051  
Myanmar  
Tel : +95 1-538648  
Fax: +95 1-538686



## **SAUDI ARABIA**

**Bed House Est For Trading**  
Al Mazro Building, Al Hasan Bin Ali Street  
Rowdah-2, P.O.Box 85987  
Riyadh 11612  
Kingdom of Saudi Arabia  
Tel : +966 1-4602501  
Fax: +966 1-4602577



## **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ООО Технологии Здоровья Релакса**  
140002, Московская область,  
г. Люберцы, ул. Колхозная, д.19а  
Российская Федерация  
тел: +7 495-789-91-74  
факс: +7 495-983-34-78





**OGAWA**

[WWW.OGAWAWORLD.RU](http://WWW.OGAWAWORLD.RU)